

NEX Pro II

Tiefengewebe-Massagegerät

BENUTZERHANDBUCH





DURCHBRECHE DEINE GRENZEN

Wir gehen bis an die Grenzen des technologischen Fortschritts,
um die Erholung zu verbessern und die Leistung
zu steigern - jederzeit und überall.



Entdecke Dein persönliches Wellness-Programm.
Einfach oben scannen

OYeeet NEX Pro II PRODUKTMERKMALE

Modellbezeichnung:	MG-T1
Frequenz:	4 Geschwindigkeitsstufen + automatischer Rotationsmodus, 1800rpm-3500rpm
Stosstiefe:	10mm
Max. Druckkraft:	60lbs = 27.1kg
Lithium-Ionen-Akku:	10.95V 2.6Ah
Ladekabel:	Type-C 5V=2A
Ununterbrochene Laufzeit:	>6 Stunden bei normaler Belastung >2 Stunden bei hoher Belastung
Motor:	3 Phasen 10 Pole mit 3 Sensoren, rückseitige Erdmagnete

LIEFERUMFANG

Schön und stabil verpackt
Tragbare Tasche, leicht zu verstauen, leicht zu tragen



AUFSÄTZE



Keukelter Kopf für
Beine, Arme, Fusssohlen



Kugelkopf für
den ganzen Körper



Gewölbter Kopf für
Beine und Arme



Kugelkopf für Rücken,
Hände, Fusssohlen



Metallkopf für Beine
und Hüfte



Weicher Kugelkopf
für Hüfte, Rücken, Hände



*Gabel für Beine,
Fusssohlen und Fersen



Weicher Kugelkopf für
Beine, Schulter,
Rücken, Nacken, Arme,
Brustmuskeln, Bauch

***Verwendung:** Bei diesem Aufsatz die Linie am Aufsatz nach oben ausrichten und zum Verbinden drücken.


KENNE DEINE OYeeet NEX Pro II

Auswechselbarer Aufsatz

ON/OFF-Einschaltknopf
4 Geschwindigkeitsstufen + automatischer Rotationsmodus
für optimalen Druck

Drucksensor-Anzeige
für Therapeuten und Behandler LED Ring

Ladeanschluss

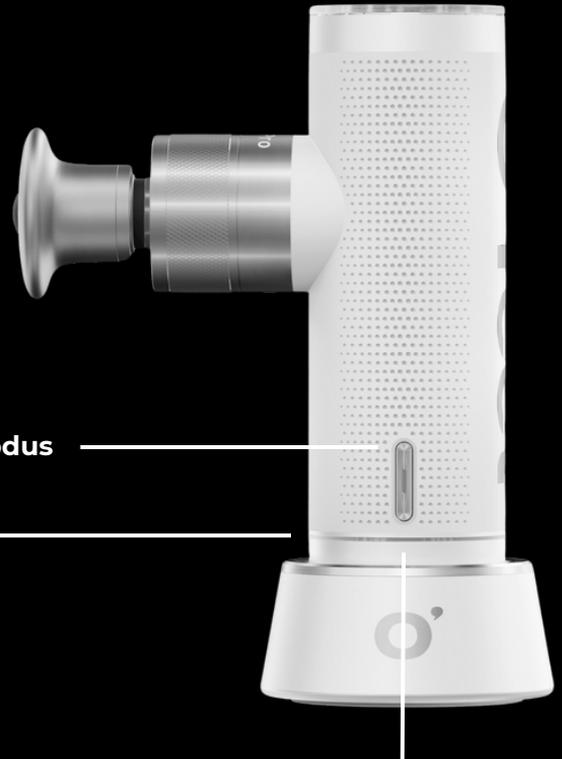

DIE VERWENDUNG DEINER OYeeet NEX Pro II

1. Um die NEX Pro II einzuschalten, halte den ON/OFF-Einschaltknopf fest gedrückt.

2. Drücke den ON/OFF-Einschaltknopf, um die Geschwindigkeit zu erhöhen, zu verringern oder den Auto-Rotationsmodus zu aktivieren.

Die NEX Pro II verfügt über 4 Geschwindigkeitsstufen und den Auto-Rotationsmodus, der automatisch zwischen 1800 U/min und 3500 U/min rotiert.

*Die LED-Leuchte beginnt zu leuchten, wenn der Auto-Rotationsmodus eingeschaltet ist.


3. So liest man die Anzeige des Drucksensors ab:

Gelb: 0 - 2.9kg

Orange: 2.9kg - 5.9kg

Rot: Stärker als 5.9kg

ON/OFF-Einschaltknopf

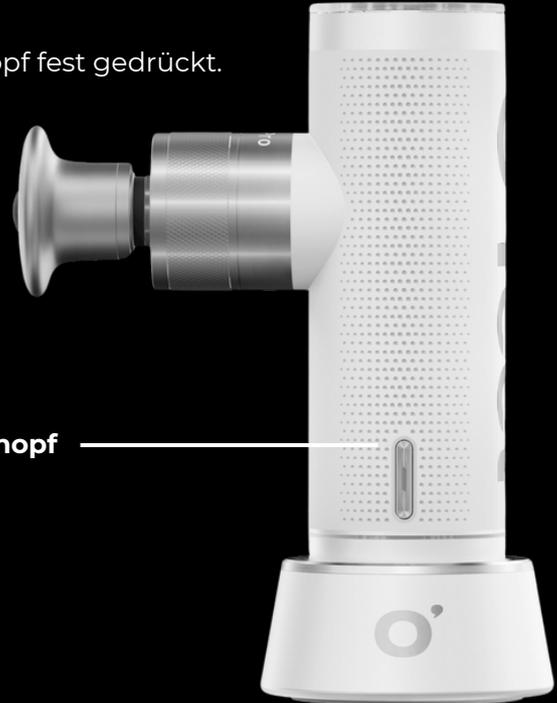

HINWEIS: Lade die NEX Pro II vor der ersten Verwendung 6 Stunden lang vollständig auf.

WANN SOLLTEST DU DIE OYeet NEX Pro II NICHT VERWENDEN

- Es gibt Vorerkrankungen und Umstände, wo wir dir von einer Anwendung abraten, zum Beispiel wenn du Osteoporose hast oder blutverdünnende Medikamente einnimmst.
- Auch bei Schmerzen und Verletzungen solltest du die Grenzen einer Behandlung kennen.
- Die NEX Pro II kann Verspannungen lösen und die Muskeln und Faszien lockern. Doch sie ist kein Ersatz für einen Arzt.
- Wir empfehlen keine Verwendung am Hals, Kopf oder auf dem Knochen.
- Die NEX Pro II ist nicht für Kinder geeignet.



LADEN DER OYeeet NEX Pro II

AUFLADEN MIT DC-LADEKABEL

Die NEX Pro II kann direkt mit dem Typ-c-Ladekabel aufgeladen werden.

Schliesse das Kabel einfach an den Ladeanschluss an und verbinde es mit dem Stromnetz.

Die LED-Leuchte des NEX Pro II-Netzschalters schaltet sich aus, und der LED-Ring beginnt zu leuchten, wenn er ordnungsgemäß angeschlossen ist, und hört auf zu leuchten, wenn er vollständig aufgeladen ist.

AUFLADEN MIT LADESTATION

Verbinde das Typ-c-Ladekabel mit der kabellosen Ladestation und schließe es an die Stromversorgung an. Lege deine NEX Pro II einfach auf die Ladestation und sie beginnt zu laden.

Die LED-Leuchte des NEX Pro II-Netzschalters schaltet sich aus und der LED-Ring beginnt zu leuchten, wenn er richtig angeschlossen ist, und hört auf zu leuchten, wenn er vollständig aufgeladen ist.

AKKU

Grün - 50% +

Orange - 25 bis 50%

Rot - 5 bis 25%

Blinkendes rotes Licht - unter 5% wird das Gerät abgeschaltet.

Lade das Gerät so schnell wie möglich auf.

DIE MARKE OYeet

MASSAGE GUN



AVAILABLE

NOW



SHAKER BOTTLE

**THE FITNESS JOURNEY WILL BE
A LIFELONG JOURNEY.**

**STAY FIT,
HAPPY AND HEALTHY.**

FRAGEN?

WIR SIND FÜR DICH DA!



mineshop.ch GmbH
Wydenmatt 8
6130 Willisau
Schweiz